



initial[™]
IQ ONE SQIN

Sistema de cerámica
para dar color
y forma pintando

GC

El 90 % de todos los dientes se piden en un tono específico...

Desde hace algún tiempo, es posible realizar restauraciones posteriores a partir de un único material, como el disilicato de litio o el zirconio, que pueden alcanzar un resultado estético adecuado sin laboriosas técnicas de estratificación. El trabajo monolítico está en alza.

Con **GC Initial IQ ONE SQIN**, el sistema de cerámica para dar color y forma pintando, también se pueden lograr restauraciones estéticamente atractivas adecuadas para la región anterior. Basado en la filosofía «GC Initial IQ», el sistema está compuesto por diferentes materiales cerámicos perfectamente adaptados para su uso conjunto, lo que garantiza un acabado eficiente y estéticamente convincente de las restauraciones monolíticas y las restauraciones bucales reducidas.





initial[™]
IQ ONE SOIN

Initial IQ Lustre Pastes ONE

La cerámica para maquillar más versátil para coloraciones externas, así como para la caracterización interna de subestructuras. Cuando se utiliza con SQIN, también actúa como coacción de conexión.

- ✓ Consistencia lista para su uso
- ✓ Fluorescencia inherente
- ✓ Profundidad de color 3D

Initial IQ SQIN

Completa el contorno final de sus restauraciones ofreciendo vitalidad, textura y un brillo natural.

- ✓ Forma y textura sencillas
- ✓ Efecto de auto glaseado
- ✓ Estructura superficial 3D



Initial Spectrum Stains

Maquillajes en finos polvos para obtener efectos individuales adicionales.

- ✓ Infinitos matices de color
- ✓ Se puede mezclar con Lustre Pastes ONE o SQIN

Con **GC Initial IQ ONE SQIN**, el sistema de cerámica para dar color y forma pintando, podrá obtener de forma rápida y sencilla resultados estéticos de calidad, comparables a las restauraciones estratificadas convencionales, pero con un importante ahorro de tiempo.



¿Cómo funciona? Usted elige...

Técnica de microcapas (restauraciones monolíticas y restauraciones microbucales reducidas)

Los GC Initial IQ Lustre Pastes ONE se utilizan como una capa de color e individualización que garantiza una coacción de conexión perfecta antes de la aplicación de los polvos SQIN. Con la técnica de microcapas, SQIN se aplica fácilmente en una capa de 0,1 - 0,6 mm de grosor sobre la superficie maquillada y cocida de Lustre Pastes ONE. Gracias a la refinada mezcla de vidrios feldespáticos, se obtiene un efecto 3D realista que da como resultado una mayor profundidad del color y una translucidez natural.


Mezclados con el líquido de Form & Texture, los polvos SQIN se convierten en una pasta cerámica muy compacta y densa. Sus exclusivas propiedades de aplicación y modelado facilitarán el texturizado de la superficie individual, con propiedades de autoglaseado después de la cocción cerámica.



¡...lo que pinta es lo que obtiene!

Técnica de maquillaje (monolítica)

Disponible en una consistencia lista para para su uso, la cerámica feldespática maquillada 3D GC Initial IQ Lustre Pastes ONE añade profundidad al color y una translucidez natural con un glaseado muy natural a sus restauraciones monolíticas. Las pastas se pueden aplicar en capas más gruesas para garantizar una vitalidad insuperable y un glaseado muy natural. Con su fluorescencia inherente, se ajustan para aumentar la fluorescencia de sus restauraciones monolíticas, especialmente cuando se utiliza Lustre Paste ONE Neutral FLUO (L-NFL).

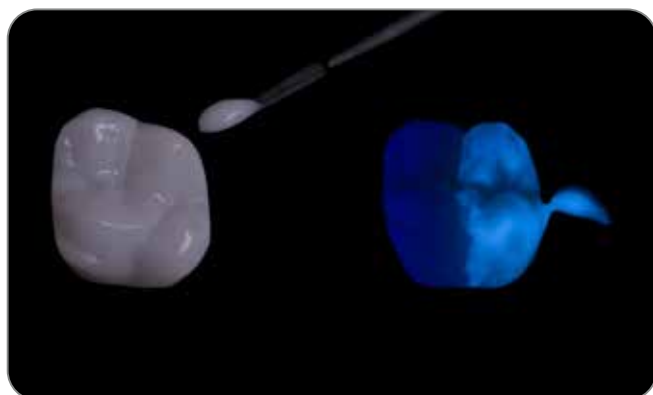

Estético



Belleza interior



Fluorescencia natural



Estética en rojo y blanco



Estética máxima dentro de una microcapa



Facilidad de uso y ahorro de tiempo



Crea la forma y la textura fina en la fase húmeda.
Sin cambios tras la cocción.



Initial IQ Lustre Pastes ONE también se puede utilizar como cocción de conexión.



Propiedades de autoglaseado.
Consiga un bonito glaseado final con una sola cocción.

Práctico



Versátil

Un sistema...




...para todas sus realizaciones de cerámica a volumen total con Zr y LDS



...para las técnicas de microcapas y maquillaje



...para restauraciones anteriores y posteriores

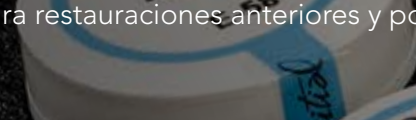

ONE SQIN System Set permite obtener fácilmente resultados estéticos elevados, comparables a las restauraciones estratificadas convencionales, pero con un importante ahorro de tiempo y una selección de los principales componentes cerámicos.



GC Initial IQ ONE SQIN SYSTEM SET

- 10 SPS Stain (SPS-1 / 2 / 7 / 8 / 13 / 14 / 17 / 18 / 19 / 20), 3 g
- 1 SPS Glaze FLUO (GL-FLUO), 10 g
- 1 SPS Glaze Liquid, 25 ml
- 2 IQ LP ONE Lustre Paste Neutral (L-N / L-NFL), 4 g
- 4 IQ LP ONE Lustre Body Shade (L-A / B / C / D), 4 g
- 6 IQ LP ONE Enamel Effect Shade (L-3 / 6 / 8 / 9 / 10 / OP), 4 g
- 1 IQ LP ONE/NF Diluting Liquid, 8 ml
- 1 IQ LP ONE/NF Refresh Liquid, 8 ml
- 5 IQ SQIN Powder Dentin (Body A / B / C / D / BL-D), 10 g
- 5 IQ SQIN Powder Enamel (E-57 / 58 / 59 / 60 / BL-E), 10 g
- 1 IQ SQIN Powder Translucent Opal Booster (TO), 10 g
- 3 IQ SQIN Powder GUM (claro, oscuro, neutro), 10 g
- 1 IQ SQIN Form & Texture Liquid, 25 ml
- 1 Paleta de mezcla IQ LP ONE
- 1 Pincel IQ LP ONE 00
- 1 Pincel IQ LP ONE 2
- 1 Funda de plástico IQ LP ONE
- 1 Manual técnico IQ ONE SQIN
- 1 Carta de colores IQ LP ONE
- 1 Carta de colores SPS



GC Initial IQ SQIN SHADES SET

- 5 IQ SQIN Powder Dentin (Body A / B / C / D / BL-D), 10 g
- 5 IQ SQIN Powder Enamel (E-57 / 58 / 59 / 60 / BL-E), 10 g
- 1 IQ SQIN Powder Translucent Opal Booster (TO), 10 g
- 3 IQ SQIN Powder GUM (claro, oscuro, neutro), 10 g
- 1 IQ SQIN Form & Texture Liquid, 25 ml
- 1 Manual técnico IQ SQIN



GC Initial IQ Lustre Pastes ONE - V-SHADES SET

- 2 IQ LP ONE Lustre Paste Neutral (L-N / L-NFL), 4 g
- 4 IO LP ONE Lustre Body Shade (L-A / B / C / D), 4 g
- 10 IQ LP ONE Enamel Effect Shade (L-1 / L-2 / L-3 / L-4 / L-5 / L-6 / L-7 / L-8 / L-9 / L-10), 4 g
- 1 IQ LP ONE Enamel Effect Opal (L-OP), 4 g
- 1 IQ LP ONE Enamel Effect Value (L-V), 4 g
- 1 IQ LP ONE/NF Diluting Liquid, 8 ml
- 1 IQ LP ONE/NF Refreshing Liquid, 8 ml
- 1 Paleta de mezcla IQ LP ONE
- 1 Pincel IQ LP ONE 00
- 1 Pincel IQ LP ONE 2
- 1 Carta de colores IQ LP ONE



La técnica ONE SQIN para todas sus restauraciones con zirconio y disilicato de litio

- ✓ Cree detalles de forma y textura fina en la fase húmeda: sin cambios tras la cocción.
- ✓ Propiedades de autoglaseado: consiga un bonito glaseado final con una sola cocción.
- ✓ Nivel de fluorescencia óptimo: garantiza el aspecto natural de los dientes en cualquier condición lumínica.
- ✓ Estética máxima dentro de una microcapa.



Fotografías por cortesía de:

ZTM Michael Brüschi (Alemania): pág. 7 (imagen central y derecha); pág. 9 (imagen central derecha e inferior derecha); pág. 13 (lado izquierdo de la imagen central izquierda, lado derecho superior y lado derecho de la imagen inferior derecha)
MDT Leonardo Cavallo (Italia): pág. 7 (imagen izquierda); pág. 9 (imagen superior izquierda)
MDT Patric Freudenthal (Suecia): pág. 13 (lado derecho de la imagen central izquierda)
ZTM Stefan Roozen (Austria): pág. 6 y pág. 10; pág. 13 (lado izquierdo de la imagen inferior derecha)

*initial*TM
IQ ONE SQIN

GC EUROPE N.V.

Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info.gce@gc.dental
<https://europe.gc.dental>

GC IBÉRICA

Dental Products, S.L.
Edificio Codesa 2
Playa de las Américas 2, 1º, Of. 4
ES-28290 Las Rozas, Madrid
Tel. +34.916.364.340
Fax. +34.916.364.341
comercial.spain@gc.dental
<https://europe.gc.dental/es-ES>

GC



Since 1921
100 years of Quality in Dental